BLIMO

KÄYTTÖOHJE - BLIMO X-600 PREMIUM



1 Turvallisuus

X-600-laitetta saa käyttää vain yksi henkilö, jolla ei ole näkö-, kuulo- tai reagoimiskykyä heikentäviä sairauksia. Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, suosittelemme, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen X-600-laitteen käyttöä.

- Aja esteiden yli ja reunakivien päälle vain niiden matalimmassa kohdassa ja suorassa kulmassa.
- Äkillisiä käännöksiä tai nopeuden muutoksia ei suositella.
- Vältä jyrkkiä pintoja, jos on olemassa luistamisen vaara jäisten tai märkien pintojen vuoksi.
- Vältä ajamista irtonaisilla pinnoilla, kuten soralla.
- Aja aina suoraan ylämäkeen, älä zigzag-liikkein.
- Älä käännä X-600-mallia kaltevilla pinnoilla.
- Älä aja X-600:llä portaita alas.
- Aja aina eteenpäin alamäkiä, reunakiveyksiä ja muita esteitä alas.

1.1 Kaatumisenestopyörät

X-600 on varustettu takana kaatumisenestopyörillä. Nämä ovat hätätilanteiden varajärjestelmä, johon ei pidä koskaan luottaa normaalikäytössä. Ne on suunniteltu estämään X-600:n kaatuminen taaksepäin jyrkissä rinteissä. Jos huomaat pyörissä vaurioita, lopeta skootterin käyttö ja vie se sertifioidulle mekaanikolle, joka voi varmistaa, että alusta ei ole vaurioitunut.

1.2 Turvalliset rinteet

X-600 voi kiivetä jopa 12 asteen kaltevuuden nousuja vaaratta. Tällä 12 asteen kaltevuudella X voi pysähtyä, jarruttaa ja kääntyä. Jyrkempiä nousuja on mahdollista yrittää, mutta suosittelemme vahvasti, että et tee niin. Vähennä skootterin takapään kuormitusta liu'uttamalla istuinta mahdollisimman paljon eteenpäin ja nojaamalla eteenpäin, jotta skootteri ei kaadu taaksepäin nousuissa.



Kuva 1 – Suositellut kaltevuudet

2 Johdanto

X-600 on korkean teknologian liikuntaväline, joka palvelee sinua uskollisesti ja tarjoaa iloa vuosien ajan. Tämä käyttöohje esittelee X-600:n käytön, huollon ja hoidon. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin asiasta, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut X-600:n. Kaikki huoltotyöt tulee suorittaa joko valtuutettu jälleenmyyjä tai sertifioitu mekaanikko.

3 X-600

3.1 Käyttötarkoitus

X-600 on suunniteltu käytettäväksi tasaisella päällysteellä tai tiellä paikallisten lakien mukaisesti. X-600:tä voidaan käyttää märällä ja tuulisella säällä, mutta huonoissa sääolosuhteissa matkaa suunniteltaessa on käytettävä harkintaa. Jos päällysteellä on yli 1 cm vettä, on oltava erityisen varovainen, koska skootterin pito ja ohjattavuus voivat heikentyä. Missään tapauksessa useampi kuin yksi henkilö ei saa käyttää ajoneuvoa samanaikaisesti.

3.2 Tahaton liike


Ennen nousua X-600:n tulee aina olla paikallaan. Kun X-600 kytketään päälle, se pysyy paikallaan, kunnes jokin seuraavista tapahtuu:

1. Eteen- tai taaksepäin-vipu vedetään.
2. Vapaakäyntitoiminto kytketään päälle.

Älä yritä käyttää ajoneuvoa sen ulkopuolelta.

Jos ajoneuvo on liikkeessä, hätäpysäytys voidaan suorittaa vapauttamalla kaasuvivut ja vetämällä voimakkaasti käsikäyttöistä jarruvipua ohjauskahvan oikealla puolella.

4 Digitaalinen ohjauskahvan opas

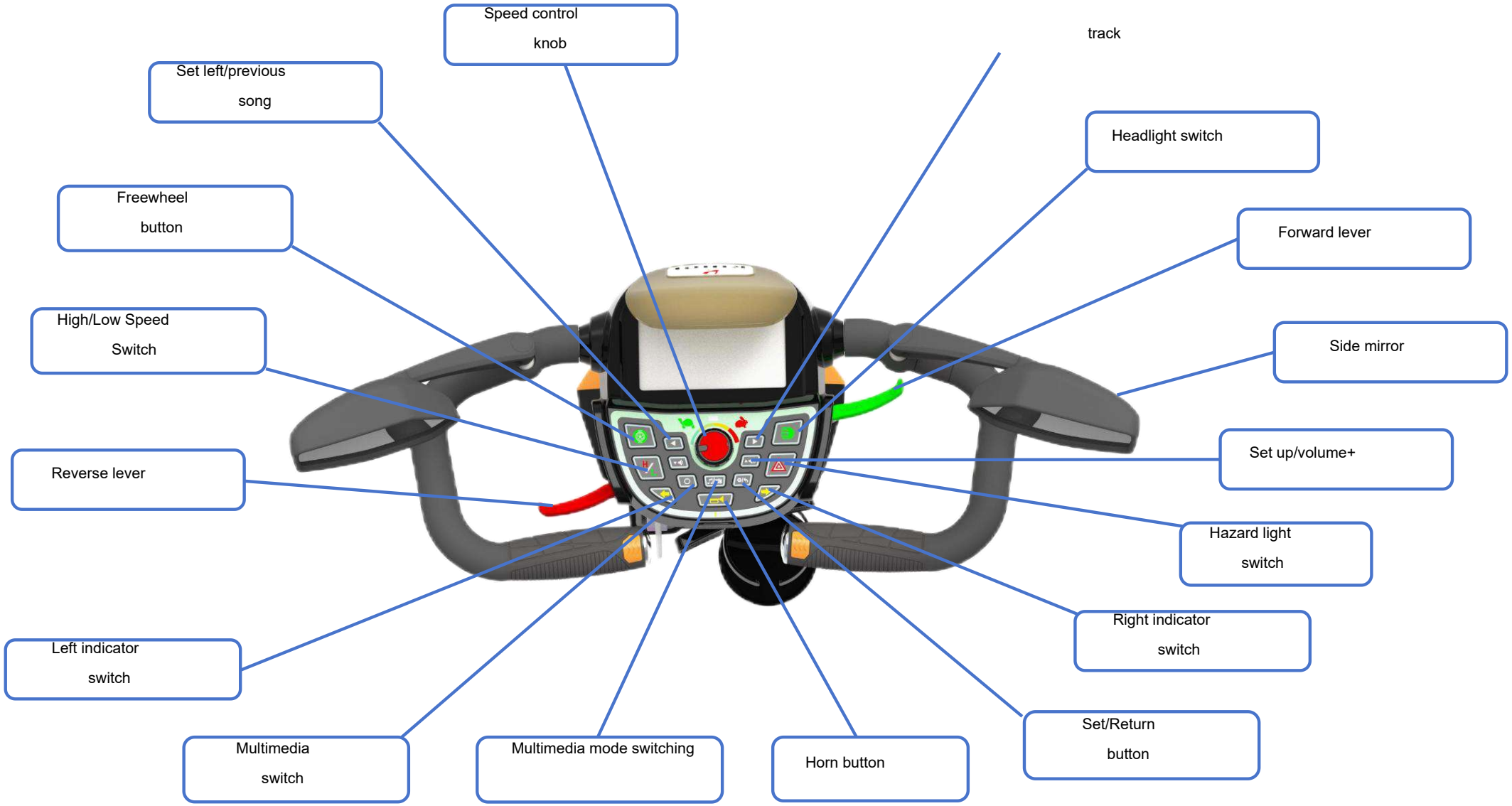

5 X-600:n käyttö


5.1 Avaimet ja avainperät

X-600-mallin mukana toimitetaan kaksi avaimetonta kauko-ohjainta:



Avaimeton avain x2

Avaimet toimivat 10 metrin säteellä skootterista.

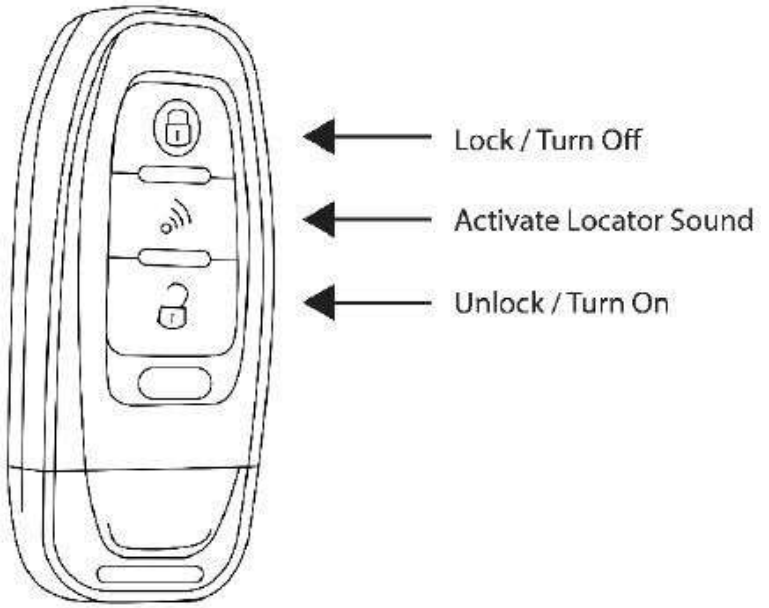

Virran kytkeminen
Käynnistä X-600 istumalla kuljettajan istuimelle ja painamalla joko avaimenperän "Unlock / Turn On" -painiketta tai ohjauspylvään "Start/Stop" -painiketta.

Virran katkaiseminen
Skootterin sammuttamiseksi paina avaimenperän "Lukitse/Sammuta"-painiketta tai ohjauspylvään "Käynnistä/Pysäytä"-painiketta.

Paikannusääni
Jos avaimeton kaukosäädin on kantaman sisällä, voit käyttää tätä toimintoa skootterin paikantamiseen vilkkaassa ympäristössä. Painamalla paikannusääntä-painiketta aktivoit voimakkaan äänimerkin.

5.2 Istuimen säätö

On tärkeää säätää istuin hyvään asentoon, jotta voit käyttää kaikkia ajoneuvon hallintalaitteita mukavasti.

Eteenpäin/taaksepäin


Voit siirtää istuinta eteen- tai taaksepäin tarttumalla istuimen alla oikealla puolella olevaan mustaan vipuun istuessasi.

Työnnä jaloillasi voimakkaasti lattiaa vasten.


TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä ohjauskahvaa työntämään tai vetämään itseäsi ylös.

Selkänojan säätö

Istuimen kallistusta voidaan muuttaa istuimen oikealla puolella istuessa olevalla nostovivulla.

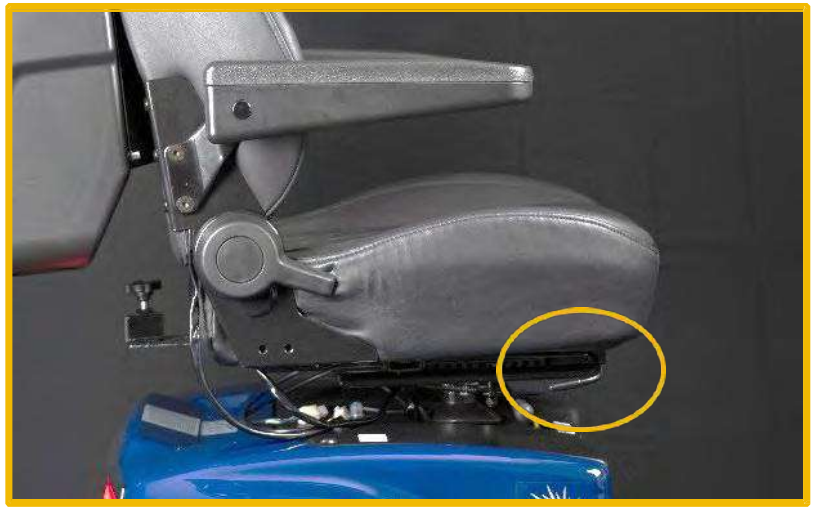

Kuva 3 – Vedä mustasta vivusta säätääksesi istuimen asentoa

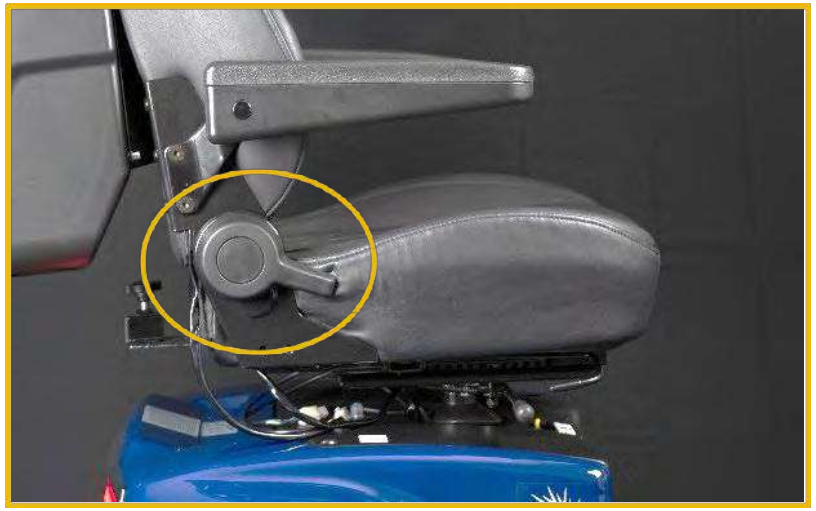

Kuva 4 – Säädä selkänojaa vetämällä mustasta kahvasta

Kääntöasennon säätö

Helppokäyttöisyyden takaamiseksi istuin voidaan kääntää 90 asteen kulmaan.

Istuimen kulmaa voi muuttaa istumalla istuimelle, vetämällä kääntökahvasta skootterin etuosaa kohti ja kääntämällä istuinta vastapäivään.



Kuva 5 – Vedä mustasta kahvasta säätääksesi selkänojaa

5.3 Ohjaustangon säätö

Ohjaustangon kulmaa voidaan säätää painamalla ohjaustangon etuosassa olevaa vipua alaspäin.

Koko ohjauskahva voi sitten kallistua eteen- ja taaksepäin, jotta löydät mukavan ajoasennon. Vapauta vipu varmistaaksesi haluamasi asennon.

Huomaa, että ohjauskahvan liian suuri laskeminen voi vaikeuttaa ohjausta.

Yritä löytää asento, josta digitaalinen ohjauspaneeli on hyvin näkyvissä ja ohjaus voidaan kääntää täysin vasemmalle ja oikealle.



5.4 Ohjaus

X-600 on varustettu mekaanisella ohjauspylväällä, jota tulisi käyttää mieluiten molemmilla käsillä. Kun X-600 on paikallaan, ohjaus voi tuntua hieman raskaalta tai jäykältä. Ohjaus kevenee, kun ajoneuvo on liikkeessä.

Tarkimman ohjauksen saavuttamiseksi X-600:n tulisi liikkua eteen- tai taaksepäin hallittavalla nopeudella. Työnnä ohjauskahvan toista puolta varovasti poispäin itsestäsi, jolloin X-600 alkaa kääntyä. Varmista, että tarkkailet jatkuvasti ympäristöäsi kaikissa liikkeissä.

5.5 Kiihtyvyys ja jarrutus

5.5.1 Nopeuden säätö

X-600-mallissa on useita nopeuden säätötapoja: korkea ja matala nopeustila sekä maksiminopeuden rajoitin.

5.5.1.1 Nopea ja hidas nopeustila

Korkea nopeus (H) ja matala nopeus (L) säädetään H/L-painikkeella.



Kuva 7 – H/L-nopeuden säätö

5.5.1.2 Maksiminopeuden rajoitin

Punaisella säätimellä säädetään skootterin ajonopeutta tai sovitetaan nopeus kävelevän henkilön nopeuteen. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun skootteria käytetään ahtaissa tiloissa.

Käännä valitsinta myötäpäivään, jos haluat ajaa nopeammin, ja vastapäivään, jos haluat ajaa hitaammin.



Kuva 8 – Maksiminopeuden rajoitin

5.5.1.3 Kaasuvivut

Kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta ohjataan ohjaustangon punaisella ja vihreällä vivulla. Ne on suunniteltu estämään eteen- ja taaksepäinajon samanaikainen aktivointi.

Ajaaksesi eteenpäin, vedä varovasti vihreää vipua. X-600 kiihtyy nopeudensäätimillä asetettuun suurimpaan sallittuun nopeuteen. Hidastaaksesi tai pysähtyäksesi, vapauta kaasuvipu ja skootteri pysähtyy. Hätätilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella sijaitsevasta jarrukahvasta.

Peruutusvaihde voidaan kytkeä vetämällä punaisesta vivusta, kun skootteri on pysähdyksissä. Lisätietoja peruutusvaihteesta on kohdassa 5.5.3 Peruutus.

5.5.2 Vapaakäyntitila

Saatat joutua siirtämään X-600:tä ilman moottoria. Tämä voidaan tehdä painamalla ja pitämällä painettuna ”Vapaakäynti”-painiketta. Skootterin on oltava päällä ja digitaalinäytön valaistuna.

Paina ja pidä painettuna painiketta, jossa on tämä symboli: 
Vapauta painike, jotta jarrut kytkeytyvät uudelleen:
Oman turvallisuutesi vuoksi käytä tätä toimintoa vain tasaisella alustalla. Vapaakäyntitilassa on oltava varovainen skootterin ohjaamisessa, koska jarruja ei ole.

TÄRKEÄ VINKKI – Vapaakäyntitilassa skootteri jatkaa liikkumistaan, jos sitä työnnetään.

5.5.3 Peruuttaminen

Varmista, että X-600 on paikallaan ja tasaisella alustalla, ennen kuin kytket peruutusvaihteen. Ennen liikkeellelähtöä tarkista, että alueella ei ole esteitä ja että suunniteltu reitti on riittävän leveä.

Vedä varovasti punaisesta vivusta, niin X-600 alkaa liikkua hitaasti taaksepäin. Hidastaaksesi tai pysäyttääksesi, vapauta punainen vipu, niin skootteri pysähtyy. Hätätilanteessa käsijarru voidaan kytkeä vetämällä ohjaustangon oikealla puolella olevasta jarrukahvasta.

5.6 X-600:n käynnistäminen

X-600 voidaan käynnistää, kun avaimeton kauko-ohjain on skootterin lähellä ja Start/Stop-painiketta painetaan (kuva 9).

X-600 on käynnistynyt ja käyttövalmis, kun tervetulonäyttö on näkynyt ja digitaalinen värinäyttö näyttää visuaalisia tietoja (kuva 10).




Kuva 9 – Käynnistys-/pysäytyspainike



Kuva 10 – Digitaalinen kojelauta, joka näyttää tietoja

5.7 Digitaalinen värinäyttö

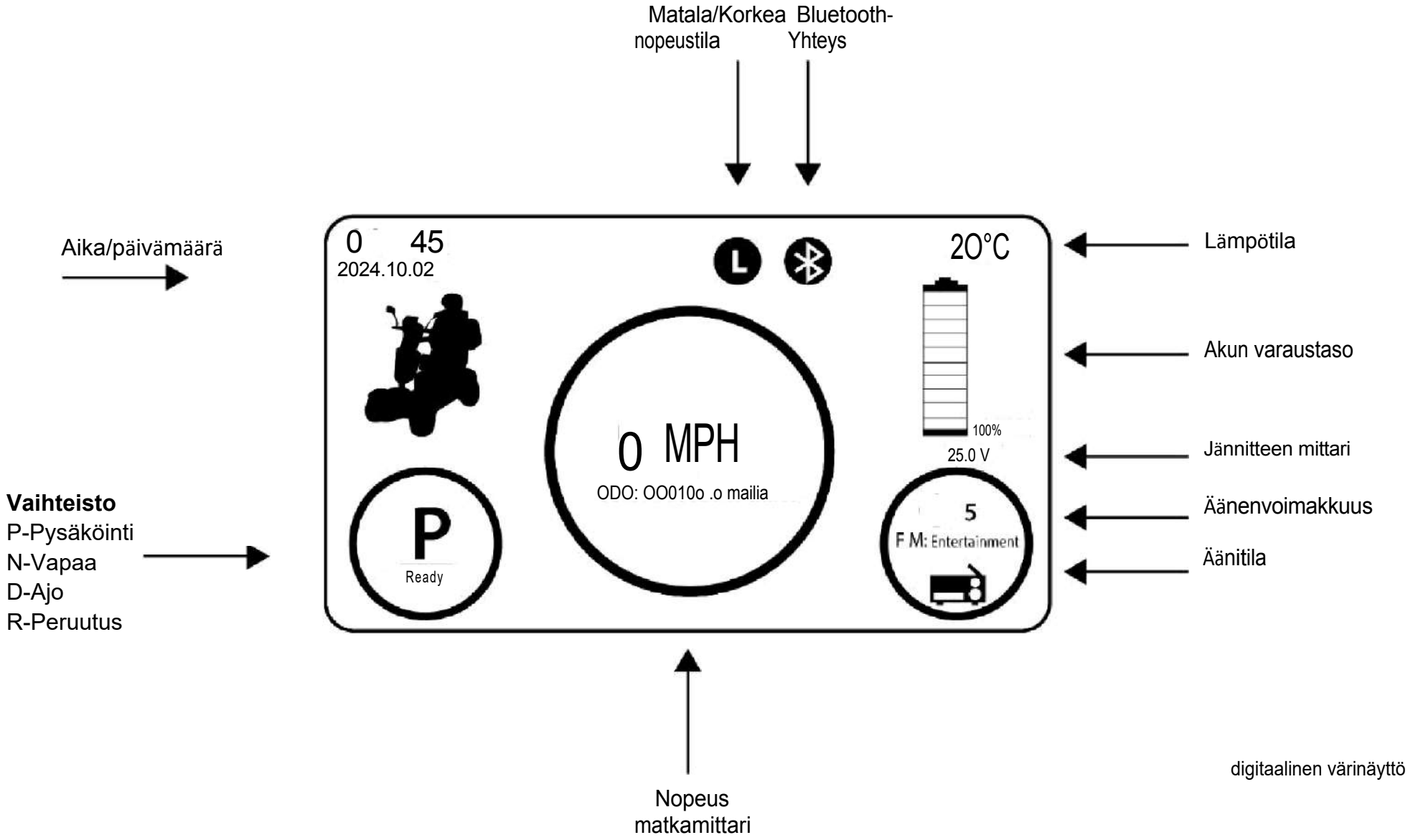

digitaalinen värinäyttö

5.7.1 Matkamittari

Digitaalisessa värinäytössä näkyvät mailit ovat kumulatiivisia ja edustavat skootterin kulkemaa kokonaismatkaa.

5.7.2 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä asetukset/takaisin-painiketta painettuna kolme sekuntia.
2. Paina alas-painiketta  ja korosta ”Järjestelmä”, paina OK-painiketta.
3. Paina alaspäin-painiketta  ja korosta "Paikalliset asetukset", paina OK-painiketta kahdesti.
4. Paina alaspäin-painiketta  ja korosta "Aika ja päivämäärä", paina OK-painiketta.
5. Käytä alas-painiketta  valitse joko Vuosi, Kuukausi, Päivä, Tunti tai Minuutti, paina OK-painiketta
6. Käytä painikkeita  säätääksesi asetusta.
7. Paina OK-painiketta  vahvistaaksesi asetuksen.
8. Toista tarvittaessa vaiheet 5–7 vuoden, kuukauden, päivän, tunnin tai minuutin säätämiseksi.
9. Paina Asetukset/Takaisin-painiketta palataksesi päänäyttöön.
10. Päiväys ja kellonaika on nyt asetettu.

5.8 Ilmaisimet

Ilmaisimet ovat kirkkaita, helposti näkyviä oransseja LED-valoja.

Kytke ne päälle painamalla joko vasenta  tai oikeaa  painiketta kerran ennen liikkeen aloittamista. Kun käännös on suoritettu ja se on turvallista, paina vilkkupainiketta uudelleen vilkun sammuttamiseksi.

5.9 Varoitusvalot

Hätätilanteessa molemmat vilkut voidaan kytkeä päälle samanaikaisesti painamalla  painiketta. Tällöin sekä vasen että oikea vilkku vilkkuvat edessä ja takana, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

5.10 Äänimerkki


Sähköinen äänimerkki aktivoidaan painamalla ohjauskahvan yläosassa olevaa  -painiketta. Äänimerkkiä saa käyttää vain liikennesääntöjen mukaisesti. Äänimerkki soi vain, jos skootteri on käynnissä.

5.11 Bluetooth

X-600-mallissa on integroitu Bluetooth-yhteys ja kaksi kaiutinta, jotka on rakennettu ohjauspylvääseen. Mobiililaitteet

voidaan yhdistää skootteriin musiikin ja äänen toistamista varten:

1. Käynnistä skootteri ja mobiililaitteesi Bluetooth
2. Siirry mobiililaitteesi Bluetooth-asetuksiin
3. Valitse laite nimeltä "scooter" (katso kuva 13)
4. Syötä PIN-koodi ”0000” ja muodosta yhteys
5. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-kuvake näkyy näytöllä (katso kuva 12)
6. Toistaaksesi ääntä, siirry mobiililaitteesi äänisovellukseen ja paina Toista
7. Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennyspainikkeilla (katso kuva 2).
8. Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla vasenta ja oikeaa painiketta

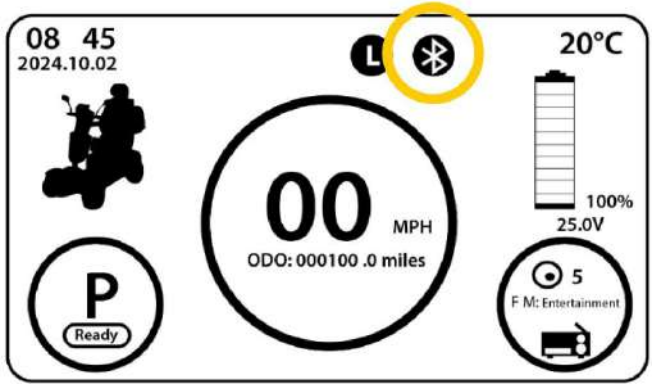

Kuva 12 – Bluetooth-yhteys aktiivinen



Kuva 13 – Bluetooth-puhelimen asetukset

5.12 Näytön peilaus

X-600-digitaalinen värinäyttö voi peilata mobiililaitteesi (Android tai iOS) näytön. Peilaa matkapuhelimesi näyttö

seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Käynnistä X-600 ja yhdistä matkapuhelimesi skootteriin Bluetoothin kautta (katso 5.11)
2. Lataa EYLINK-sovellus matkapuhelimesi App Storesta (katso kuva 14).
3. Avaa EYLINK-sovellus ja kirjaudu sisään Apple- tai Google-tililläsi.
4. Salli sovellukselle kaikki pyydetyt käyttöoikeudet: sijainti, media, mikrofoni, Bluetooth ja ilmoitukset.
5. Valitse laite luettelosta, joka alkaa kirjaimilla "EDG", tai paina "Yhdistä kojelautaan".
6. Kun sinua pyydetään, liity Wi-Fi-verkkoon "iteAP" ja odota yhteyden muodostumista.
7. Paina "Screen Mirroring" (Näytön peilaus), paina "Start Screen Mirroring" (Aloita näytön peilaus) ja paina "Start Broadcast" (Aloita lähetys).
8. Matkapuhelimen näyttö peilataan skootterin digitaaliseen värinäyttöön.
9. Avaa mobiilisovellus, jota haluat katsella, esim. äänisoitin tai navigointi.
10. Kallistamalla puhelinta vaakasuoraan asentoon digitaalinen värinäyttö kääntyy vaakasuoraan asentoon.
11. Aseta matkapuhelimesi ylösalaisin skootterin matkapuhelintelineeseen.

VINKKI – Aseta puhelin pidikkeeseen ylösalaisin.
Kun asetat sen oikein päin, digitaalinen värinäyttö kääntyy pystyasentoon.

Voit lopettaa näytön peilauksen matkapuhelimesta seuraavasti:

1. Siirry EYLINK-sovellukseen ja paina ”Exit Screen Mirroring” (Poistu näytön peilauksesta).
2. Digitaalinen värinäyttö palaa takaisin käyttöruutuun.



Kuva 14 – EYLINK-sovelluksen kuvake



Kuva 15 – EYLINK-sovellus

5.13 USB-latausportit

X-600 on varustettu USB-latausporteilla ohjauspylvään oikealla puolella. **Portti 1** sijaitsee LED-valon vieressä

ja **portti 2** oikealla puolella.

USB-portti 1: Vain dataportti
Tätä porttia voidaan käyttää äänitiedostojen toistamiseen USB-asemilta.

USB-portti 2: Vain latausportti
Tätä porttia voidaan käyttää matkapuhelimen ja tablettien lataamiseen.



Kuva 16 – USB-latausportit

5.14 Pullon ja matkapuhelimen pidike

X-600-mallissa on kaksi muovista valmistettua pidikettä. Niissä voit säilyttää turvallisesti pullotettuja juomia ja matkapuhelintasi.

TÄRKEÄ VINKKI – Pullotelinettä ei saa käyttää alkoholijuomien säilyttämiseen.



Kuva 17 – Ohjaustankoon asennettu kuppi- ja matkapuhelinteline

5.15 Laukkupidike

Skootterin ohjauspylvääseen on integroitu kätevä laukkujen pidike. Tätä pidikettä voidaan käyttää henkilökohtaisten laukkujen tai ostosten säilyttämiseen.

Voit avata pidikkeen painamalla pidikkeen alaosaa, jolloin pidike työntyy kohti sinua. Pussipidike kestää **enintään 2,5 kg:n painon**.



Kuva 18 – Pussipidike

5.16 Latausportti

X-600 voidaan ladata ohjauskahvan latausportin avulla.

Portti sijaitsee ohjauskahvan oikealla puolella. Lataa ajoneuvo liittämällä mukana toimitettu latauskaapeli porttiin.

Kun X-600 on lataustilassa, se ei siirry ajotilaan.

TÄRKEÄ VINKKI – Paras käytäntö on ladata akut jokaisen käytön jälkeen. Akkuja ei voi ylikuormittaa, koska laturi katkaisee virran automaattisesti, kun se havaitsee akun olevan täynnä.

Jos et aio käyttää skootteria pitkään aikaan, suosittelemme lataamaan akut vähintään kerran viikossa.

Tämä varmistaa, että ne pysyvät kunnossa ja ovat valmiina säännölliseen käyttöön.



Kuva 19 – Ohjaustankoon asennettu latausportti

5.17 Lämmitettävä istuin

Lämmitetty istuin -toiminto aktivoidaan käyttämällä Lämmitetty istuin -painiketta, joka sijaitsee hallintalaitteiden ja pääohjausvivun alla. Lämmitystasoa on kolme: matala, keskitaso ja korkea.

Pois	Päällä
	
Kun painikkeen LED-valot eivät pala, se tarkoittaa, että lämmitetty istuin on pois päältä.	Kun painike palaa, se tarkoittaa, että lämmitetty istuin on päällä. 3 punaista LED-valoa = korkea 2 punaista LED-valoa = keskilämpötila 1 punainen LED-valo = matala lämpötila



Kuva 20 – Lämmitettävän istuimen painike

6 Huolto

6.1 Polttimoiden vaihto

LED-valot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, mutta ne voivat lopulta vaatia vaihtamista. LED-lamput voi ostaa X-600-laitteen toimittajalta. Lamppujen vaihtaminen tulee suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä, koska se edellyttää laitteiden purkamista, jotka on suljettava uudelleen alkuperäisten valmistajan ohjeiden mukaisesti.

6.2 Akun hoito

Akkujen käyttöönottoa varten istuin on poistettava. Jos ajoneuvossasi on lämmitettävä istuin (lisävaruste), irrota molemmat liitännät ennen istuimen poistamista. Istuimen poistamiseksi vedä mustaa vipua istuimen oikealla puolella ja vedä sitä ajoneuvon etuosaa kohti. Istuimen voi sitten nostaa suoraan ylös.

X-600:n akut eivät normaalisti vaadi päivittäistä huoltoa, mutta niiden luokse saattaa olla tarpeen päästä huollon tai tarkastuksen yhteydessä. Akut sijaitsevat istuimen alla ja ne on suojattu mustalla muovikannella, joka on kiinnitetty kuudella ruuvilla.


Huollon jälkeen varmista, että ruuvit kiinnitetään kunnolla akun suojakannen palauttamiseksi paikalleen. Aseta sen jälkeen istuin takaisin ja tarkista, että se on varmasti lukittu paikalleen.

6.3 Sulakkeet

X-600-mallissa käytetyt sulakkeet ovat käytettävissä ohjausvivun etuosassa olevan peitetyn luukun kautta. Sulaketauluun pääsee käsiksi vetämällä kiinnitysklipsiä alaspäin ja liu'uttamalla kansi pois paikaltaan. Sulakkeiden vaihto on jätettävä ammattilaisille, sillä virheellinen toiminta voi vahingoittaa sähköjärjestelmää.



Kuva 21 – Sulakekotelon sijainti

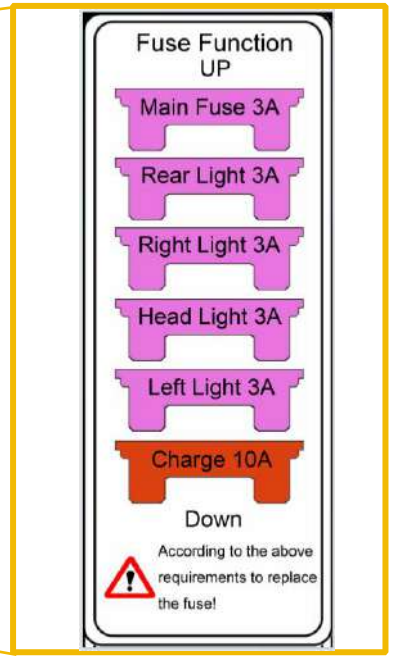

Kuva 22 – Sulakekotelon kansi

6.4 Rengaspaineet

X-600:n renkaat on suunniteltu tarjoamaan hyvä tasapaino mukavuuden ja energiatehokkuuden välillä. Väärin täytetyt renkaat voivat heikentää ajettavuutta, lyhentää toimintasädettä ja lisätä kulumista. Renkaiden kulutuspinnan syvyyden tulee olla vähintään 3 mm, jotta ne tarjoavat riittävän pidon tienpinnalla. Jos renkaat ovat kuluneet, ne on vaihdettava ennen X-600:n uudelleen käyttöä.

Eturenkaiden ilmanpaine: 35 psi
Takarenkaiden ilmanpaine: 35 psi

6.5 Puhdistus ja huolto

6.5.1 Kumimatot

Kumimatto tulee puhdistaa imurilla, johon on kiinnitetty verhoiluharja. Tahrojen poistamiseen voidaan käyttää mietoa verhoilunpesuaine- ja vesiseosta, mutta varmista, että alue kuivataan huolellisesti sen jälkeen.

TÄRKEÄ VINKKI – Älä käytä valkaisuaineita.

6.5.2 Maalipinta

Maalin hoitoon X-600 on pestävä säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla autojen pesuaineella. Kiiltävän lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää autojen kiillotusainetta. Kiillotusainetta on erittäin suositeltavaa käyttää alueilla, joilla maalipinta voi altistua epäsuotuisille sääolosuhteille.

TÄRKEÄ VINKKI – Älä koskaan käytä kiehuvaa vettä X-600:n puhdistamiseen.

7 Takuu

X-600 -laitteella on 12 kuukauden valmistajan takuu, kun se ostetaan uutena valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuaikana kaikki osat, jotka vioittuvat valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi, korjaa jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu. Jos korjaus ei ole mahdollista, laite korvataan uudella.

Jos valmistusvirhe havaitaan, siitä on ilmoitettava kirjallisesti jälleenmyyjälle, jolta X-600 on ostettu, 28 päivän kuluessa ostosta.

Tuotteet, joiden käyttöikä on rajoitettu, kuten akut ja renkaat, eivät kuulu takuun piiriin, jos niiden katsotaan kuluneen liikaa tai käytetyn väärin.

Takuu ei kata tuotteen virheellisestä käytöstä, jälkimarkkinoilla tehdyistä muutoksista tai vahingossa aiheutuneista vaurioista johtuvia vahinkoja. Takuu ei ole siirrettävissä.

Takuu ei kata vian korjaamisesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia, rahti- ja matkakustannuksia, ansionmenetyksiä, kuluja jne.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

8 Tekniset tiedot

8.1 Tekniset tiedot

Moottori	Takavetoinen suljettu vaihteist 450W/600W (4- napainen) 24 V DC	**Akut**	Kaksi 12 V 38 Ah tai 55 Ah
Kojelauta	Digitaalinen värinäyttö 14- painikkeinen ohjausvipu Maksiminopeuden valinta	**Renkaat**	Ilmarengas

8.2 Koot ja painot

Pituus	1270mm
Leveys	685 mm
Korkeus	1230 mm
Moottorin teho	450W/600W
Ohjain	PG90A
Jarrut	Sähkömagneettiset/hydrauliset
Paino	100kg (ilman akkuja)
Kantavuus	150 kg
Maavara	105 mm (kuormittamattomana)
Renkaat	10,4 tuuman ilmarenkaat
Toimintasäde	<48km
Suurin nousu	12 astetta
Kääntösäde	2100 mm

1 Kansainväliset nopeudet: Saatavilla riippuen lainkäyttöalueesta ja paikallisesta lainsäädännöstä.

2 Toimintasäde voi vaihdella akun varauksen/kunnon/lisävarusteiden, maaston tyypin, renkaiden kunnon ja ajoneuvon kuormituksen mukaan.

3 Valmistustoleranssien ja jatkuvan tuotekehityksen vuoksi näissä teknisissä tiedoissa voi olla +/-3 %:n vaihtelua.

4 Vaihtelee käyttäjän painon, maaston tyypin, akun varauksen, akun kunnon ja renkaiden kunnon mukaan.